



6.13. Формирование документа «Партограмма»

Для формирования документа «Партограмма» требуется зайти в подсистему «Отделение», затем перейти по ссылке «Пациенты отделения».

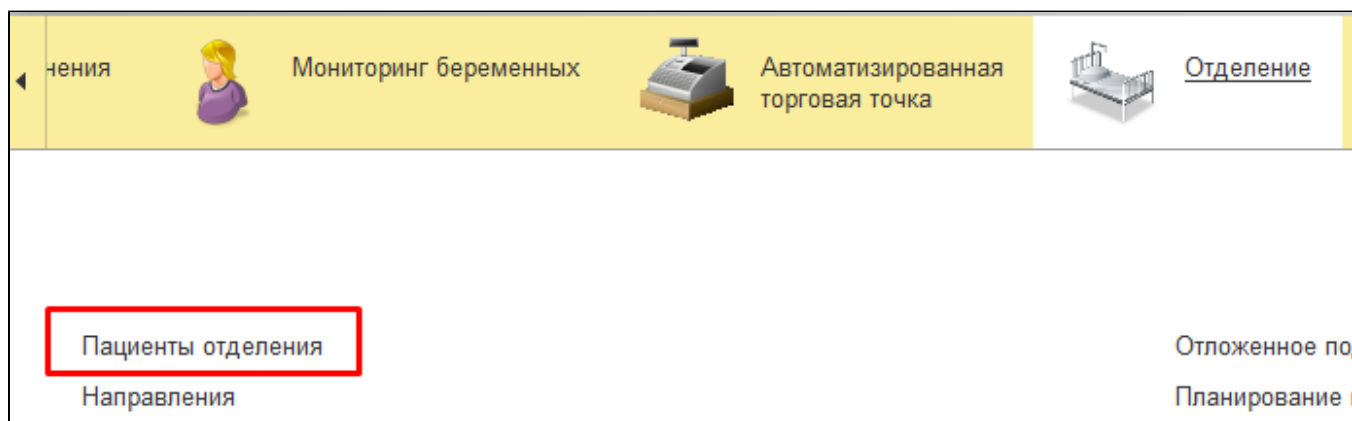

В открывшейся форме «Пост отделения стационара» выбираем пациента. На командной панели нажимаем на кнопку «Доп. документы», в выпадающем списке выбираем «Партограмма».

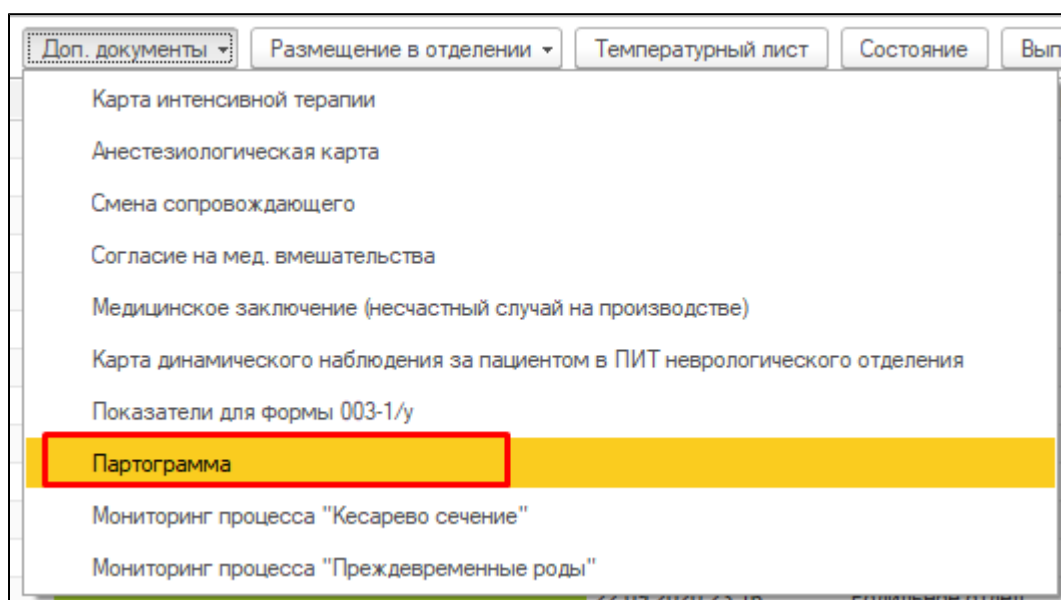

В открывшейся форме, в поле «Дата поступления» автоматически проставляется дата поступления пациента в отделение, у которого профиль «Для беременных и рожениц (акушерское дело)», «Для беременных и рожениц (акушерство и гинекология)». Если дата поступления не проставилась автоматически, можно ввести данные вручную либо отредактировать имеющиеся данные. В полях «Беременность» и «Роды» проставляется информация автоматически из показателей здоровья роженицы. Если информация не проставлена, значит показатели здоровья по пациентке не проставлены в системе. В форме документа «Партограмма» по данным полям можно проставить информацию вручную. Поля «Начало родов» и «Время отхождения вод» требуется заполнить вручную. Поле «Безводный промежуток» проставляется автоматически исходя из времени отхождения вод и даты документа. В зависимости от времени начало родов проставляются показатели времени в табличной части документа для внесения отметок и построения партограммы. Первая отметка будет соответствовать началу получаса. Например, если время начала родов 14:20, то отсчет времени начнется с 14:00, т.е. начало получаса в данном случае 14:00. Если время начала родов 14:00, то отсчет времени начнется с 14:00.

← → Партограмма (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Партограмма Еще

Номер: Дата: 29.10.2020 15:50:10 Пациент: Тестовик Тест Тест Медицинская карта: 1002000002 от 26.09.18, История родов

Дата поступления: 29.10.2020 11:37:33 Беременность: 1 Роды: 1 Начало построения партограммы: 29.10.2020 12:00:00

Начало родов: 29.10.2020 12:02:00 Время отхождения вод: 29.10.2020 08:00 Безводный период: 04:02

Показатель	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
Околоплодные воды																	
Конфигурация головки																	
Сокращения интенсивность																	
Сокращения периодичнос...																	
Окситоцин																	
В/в вливание																	
Пульс																	

Показатель	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
Раскрытие шейки матки										
Прохождение головки плода										
Температура										

В поле «Сердцебиение плода» проставляются отметки от 100 до 180. В случае, если будет внесена отметка до 100, то система автоматически изменит на показатель 100. Аналогично и для отметок выше 180: если отметка будет выше, то система автоматически проставит максимальное значение 180. Поле «Околоплодные воды» заполняется путем выбора соответствующего значения из выпадающего списка.

Показатель	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
Околоплодные воды						
Конфигурация головки						
Сокращения интенсивность						
Сокращения периодичнос...						
Окситоцин						
В/в вливание						
Пульс						

I - плодный пузырь цел

C - околоплодные воды светлые, чистые

M - воды с меконием (любая интенсивность окраски)

B - примесь крови в водах

A - отсутствие вод/выделений

Поле «Конфигурация головки» заполняется также выбором значения из выпадающего списка.

Конфигурация головки										
Сокращения интенсивность										
Сокращения периодичнос...										
Окситоцин										
В/в вливание										

0 - конфигурации нет

+ - швы легко разъединяются

++ - швы находят друг на друга, но легко разъединяются при надавливании

+++ - швы находят друг на друга, не разъединяются

В поле «Сокращение интенсивность» указывается значение от 1 до 5, в поле также стоит ограничение на ввод минимального и максимального значений. Поле «Сокращения периодичность» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. В зависимости от выбранного значения в поле на графике будет разнесена соответствующая штриховка: точки, косая штриховка либо сплошная штриховка. Последующие поля заполняются путем ввода числового значения в соответствующем поле.

Показатель	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00
Сокращения интенсивность	4								
Сокращения периодичнос...	4								
Окситоцин	1								
В/в вливание	30								
Пульс	90								
Sis	120								
Dia	90								

Следующая таблица отображает показатели, которые проставляются на графике не каждые 30 минут, а 1 раз в 1 час, поэтому во избежание некорректного ввода показатели вынесены в отдельную таблицу.

Показатель	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
Раскрытие шейки матки	10							
Прохождение головки плода	3/5							
Температура								
Моча протеин								
Моча ацетон								
Моча объем								

Ниже расположена таблица, в которой предусмотрен ввод полученных лекарственных препаратов. При нажатии на кнопку **«Подбор»** открывается форма **«Подбор товаров»**.

Полученные лекарственные средства

↑

↓

Подбор

Время	Препарат	Доза	Способ введения

Если в медицинской организации ведется учет остатков лекарственных средств, то автоматически отобразится список лекарственных препаратов на остатках в отделении. Для выбора лекарственных препаратов необходимо выбрать двойным кликом препарат. По ссылке **«Всего подобрано позиций»** можно просмотреть какой препарат был выбран. Далее нажать на кнопку **«Перенести в документ»**.

Подбор товаров: Партограмма (новый)

Перенести в документ

Еще ▾

?

Использовать номенклатуру дополнительного склада: ☐ Учитывать остатки: ☒ Отделение: Родильное отделение ▾

Готовые лекарственные формы

Прочая номенклатура

Найти...

Отменить поиск

Номенклатура	Латинская транс...	Действующие ...	Остаток	Е...
Натрия хлорид, р-р д/инф. (sol. pro infus.), 0,9 %, бут...	Sodium chloride	Натрия хлорид	40 000,000	мл
Нифедипин, табл. п.п.о. (tab. pellicul.), 10 мг, уп. конт...	Nifedipine	Нифедипин	150,000	шт
Новокаин, р-р д/ин. (sol. pro inject.), 0,5 %, бут. д/кр...	Novocaine	Прокаин	2 000,000	мл...
Окситоцин, р-р д/ин. и местн. прим. (sol. pro inject. e...	Oxytocin	Окситоцин	2 100,000	мл...
Окситоцин-Рихтер, р-р для в/в и в/м введ. (sol. ad in...	Oxytocin-Richter	Окситоцин	375,000	мл
Парацетамол-УБФ, табл. (tab.), 500 мг, уп. контурн. ...	Paracetamol-UBF	цефекон	100,000	шт
Перекись водорода, р-р д/местн. и наружн. прим. (s...	Hydrogen peroxide	Водорода пер...	4,000	бан
Преднизолон буфус, р-р для в/в и в/м введ. (sol. ad ...	Prednisolon bufus	Преднизолон	200,000	мл...

⬆ ⬇ ⬇ ⬆

Добавить произвольно

[Всего подобрано одна позиция \(скрыть\)](#)

Подобранные товары

N	Номенклатура	Форма выпуска
1	Окситоцин, р-р д/ин. и местн. прим. (sol. pro inject. et us. loc.), 5 МЕ/мл, ...	р-р д/ин. и местн. прим. 5 МЕ/мл

После того как отобразится запись с препаратом необходимо заполнить оставшиеся поля по нему: время, доза, способ введения. Поле «Время» заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. В выпадающем списке первым будет время начала отчета по всем таблицам.

Поле «Способ введения» заполняется путем выбора значений из выпадающего списка.

Способ введения

внутривенно: струйно

внутривенно: капельно

внутривенно: ч/з инфузомат

подкожно

Per os

перидуральное пространство

В процессе заполнения документа «Партограмма» доступна запись документа по кнопке «Записать».

← → **Партограмма (создание) ***

Провести и закрыть Записать Провести Партограмма

Номер: Дата: 29.10.2020 15:50:10 Пациент: Тестовик Тест Тест Медицинская карта

Дата поступления: 29.10.2020 11:37:33 Беременность: 1 Роды: 1 Начало построения партограммы: 29.10.2020 12:00:00

Начало родов: 29.10.2020 12:02:00 Время отхождения вод: 29.10.2020 08:00 Безводный период: 04:02

Созданные документы расположены в подсистеме «Отделение» - «Партограмма».

Отделение Приемное отделение

Отложенное подписание

Планирование госпитализации

Индивидуальный лист наблюдения

Калькуляция плана лечения

Карта динамического наблюдения за пациентом в ПИТ

Карта проведения фототерапии

Корректировка индивидуального листа наблюдений

Лист питания

Мониторинг процесса "Кесарево сечения"

Мониторинг процесса "Преждевременные роды"

Партограмма

Показатели для формы 003-1/у

Показатели здоровья новорожденного

Показатели здоровья роженицы

Для того, чтобы продолжить вносить данные по пациенту необходимо нужный документ в списке, например, ввести в окне поиска ФИО пациента.

← → ☆ Партограмма

Создать Заполнение...

Поиск (Ctrl+F) ×

Дата	↑	Номер	Начало построения партограммы	Пациент	Дата поступления	Беременность	Время отхождения вод	Роды	Безводный период
29.10.2020 15:50:10		000000008	29.10.2020 12:00:00	Тестовик Тест Т...	29.10.2020 11:37:33	1	29.10.2020 8:00:00	1	04:02

Двойным кликом открыть нужный документ и продолжить заполнение партограммы по пациенту. На основании показателей «Сердцебиение» и «Пульс» строятся графики. Поэтому если за какой-то промежуток времени не будет стоять отметка, то на графике по соответствующему времени будет разрыв кривой линии. Перед тем как просмотреть печатную форму партограммы необходимо провести документ. Если документ будет не проведен, то при нажатии на кнопку «Печать» в системе выйдет диалоговое сообщение о необходимости проведения документа. При выборе варианта «Да» документ будет проведен и отобразится печатная форма документа.

← → ☆ Партограмма 000000008 от 29.10.2020 15:50:10

Провести и закрыть Записать Провести Партограмма

Номер: 000000008 Дата: 29.10.2020 15:50:10 Пациент: Тестовик Тест Тест Медицинская карта: 1002000002 от 26.09.18

Дата поступления: 29.10.2020 11:37:33 Беременность: 1 Роды: 1 Начало построения партограммы: 29.10.2020 12:00:00

Начало родов: 29.10.2020 12:02:00 Время отхождения вод: 29.10.2020 08:00 Безводный период: 04:02

Показатель	12
Сердцебиение плода	
Околоплодные воды	I -
Конфигурация головки	+

1С:Предприятие

Для того чтобы распечатать документ, его необходимо предварительно провести. Выполнить проведение документа и продолжить?

Да Нет

Для соединения линий по раскрытию шейки матки и прохождении головки плода необходимо, чтобы в системе было хотя бы 2 отметки. Если показатель раскрытия шейки матки будет ниже 3, то отметка будет проставлена в латентной фазе на графике. В таком случае как только последующая отметка будет больше или равна 3-м, тогда отметка по раскрытию шейки матки перенесется на линию бдительности. Остальные отметки также автоматически перенесутся в активную фазу. Сформированную печатную форму партограммы можно распечатать по кнопке «Печать», предварительно просмотреть перед печатью по кнопке «Предварительный просмотр», указать количество экземпляров для печати в поле «Копий», а также сохранить по кнопке «Сохранить».

