


## 2.2.6 Оформление медицинского документа «Температурный лист»

**Температурный лист** - медицинский документ, предназначенный для графической регистрации суточных колебаний температуры тела больного. В него заносят также результаты некоторых других наблюдений за течением заболевания: частоту дыхания и пульса, величину АД, количество выпитой за сутки жидкости и выделенной мочи и др., а также сведения о проведенных мероприятиях по уходу и лечению больного (гигиеническая ванна, смена белья, специальные процедуры).

Для оформления данного документа необходимо в списке пациентов отделения, выбрать пациента. Далее на командной панели нажать **«Еще»** - **«Температурный лист»**.

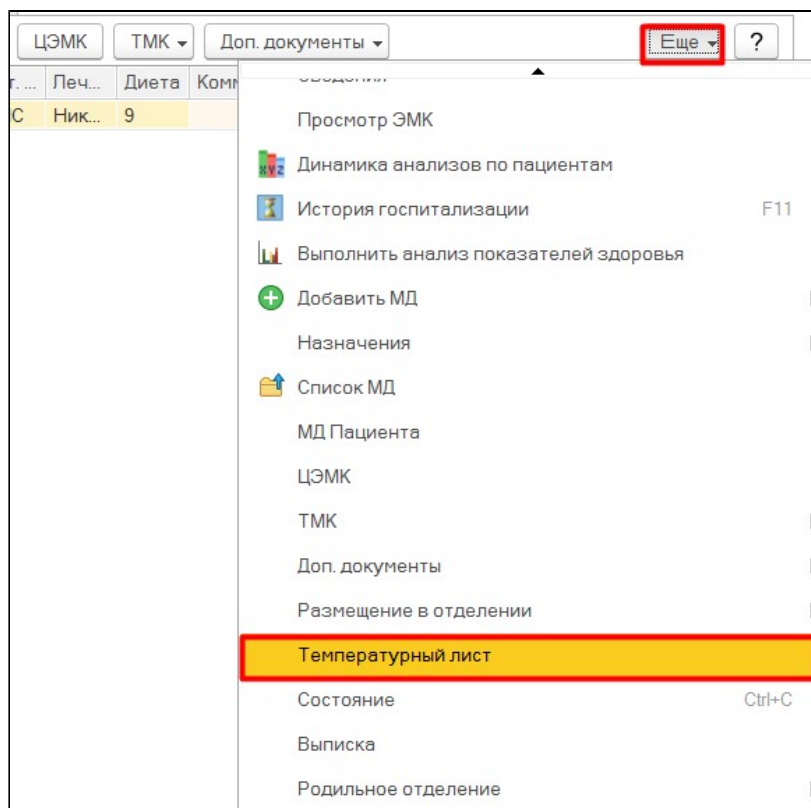

В результате откроется форма **«Регистрация показателей здоровья пациентов отделения»**, на которой отображаются все ранее созданные документы. Для оформления нового документа «Регистрация показателей здоровья пациентов отделения» необходимо нажать команду **«Создать»**.

← → ☆

Регистрация показателей здоровья пациентов отделения

Создать

Найти...

Отменить поиск

| Дата       | Время    | Отделение                 |
|------------|----------|---------------------------|
| 15.06.2020 | 5:54:51  | Неврологическое отделение |
| 15.06.2020 | 18:36:53 | Неврологическое отделение |
| 16.06.2020 | 6:33:51  | Неврологическое отделение |
| 16.06.2020 | 17:17:57 | Неврологическое отделение |
| 17.06.2020 | 6:16:12  | Неврологическое отделение |
| 17.06.2020 | 18:01:12 | Неврологическое отделение |
| 18.06.2020 | 6:07:36  | Неврологическое отделение |
| 18.06.2020 | 9:58:57  | Неврологическое отделение |
| 18.06.2020 | 18:12:08 | Неврологическое отделение |
| 19.06.2020 | 6:16:39  | Неврологическое отделение |

**Необходимо обратить внимание!!!!** Все поля в документе заполняем СТРОГО по порядку во избежания недоразумений по потере данных.

В документе указано отделение в котором находятся пациенты, дата и время заполнены текущим значением с возможностью редактирования. Для регистрации утренних показателей выбираем диапазон времени с 00:01 до 12:00 и вечерние показатели с 12:01 до 24:59. Список показателей температурного листа заполнен по умолчанию.

← →

Регистрация показателей здоровья пациентов отделения (создание)

Провести и закрыть

Записать

Провести

Настройка сбора данных

Показатели температурного листа

Отделение: 

Неврологическое отделение

Дата: 

21.09.2020

Время: 

09:03:00

Список показателей документа: Пульс; Температура; Dia; Sis; Вес; Выпито; Жидкости; Ванн ...

↑ ↓

| Палата    | Пациент         | Пульс | Температура | Dia | Sis | Вес | Выпит |
|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| Палата №1 | Кишмерешкин...  |       |             |     |     |     |       |
| Палата №1 | Кичеров Васи... |       |             |     |     |     |       |
| Палата №1 | Лыков Макси...  |       |             |     |     |     |       |
| Палата №1 | Хоробрых Але... |       |             |     |     |     |       |
| Палата №2 | Кайдалова Св... |       |             |     |     |     |       |
| Палата №2 | Антипина Кла... |       |             |     |     |     |       |

Далее необходимо внести значения по показателям здоровья по одному или нескольким пациентам, с помощью ввода данных с клавиатура или выбора значений из списка («Выбрать из списка» - «Показать все»).

Редактирование данных доступно по команде «Изменить» или с помощью двойного клика, поле станет активным для ввода данных. Если вы хотите заполнить новые показатели, то при вводе данных таким способом старые данные удалятся из базы и в истории пациента не сохранятся.

**Необходимо обратить внимание!!!!** Новые данные пациента регистрируются созданием нового документа «Регистрация показателей здоровья пациентов отделения».

Для удаления пациента из документа, его нужно выбрать и нажать Delete на клавиатуре, добавить удаленного пациента повторно в этот документ невозможно.

Для сохранения документа нажать команду «Провести и закрыть».

← →

Регистрация показателей здоровья пациентов отделения (создание) \*

Провести и закрыть

Записать

Провести

Настройка сбора данных

Показатели температурного листа

Отделение: 

Неврологическое отделение

Дата: 

21.09.2020

Время: 

9:03:00

Список показателей документа: Пульс; Температура; Dia; Sis; Вес; Выпито; Жидкости; Ванн ...

↑ ↓

| Палата    | Пациент         | Пульс | Температура | Dia | Sis | Вес | Выпит |
|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| Палата №1 | Лыков Макси...  |       | 36.6        |     |     |     |       |
| Палата №1 | Кишмерешкин...  |       | 36.6        |     |     |     |       |
| Палата №1 | Кичеров Васи... |       | 37.         |     |     |     |       |

После того как показатели здоровья пациента за несколько дней записаны в документ «Регистрация показателей здоровья пациентов отделения» можно сформировать печатную форму документа «Анализ показателей здоровья», для этого нужно выбрать пациента в списке пациентов отделения и нажать команду «Выполнить анализ показателей здоровья».

Пациенты отделения

Переведенные

Выписанные

Назначенные услуги

Пациенты по назначениям

На доработку

На пов

Найти...

Отменить поиск

Сведения

Просмотр ЭМК

Добавить МД

| Палата | Статус Сов... | Пациент            | ↑ | Возраст | Медицинская карта       |
|--------|---------------|--------------------|---|---------|-------------------------|
|        |               | Тест Тест Взрослый |   | 20, лет | 1001033385 от 16.09.20. |

В открывшемся окне установить галочку «Температурный лист» и нажать команду «Построить графики».

🏠

⬅️➡️

☆

Анализ показателей здоровья

Температурный лист


☐

Показатели:

...

Построить графики

В результате будет отображена графическая регистрация суточных колебаний температуры тела больного. При нажатии повторно на команду «Построить графики» график обновится. Для печати температурного листа нажать команду «Печать температурного листа». Если ваш график не вмещается на экране то можно двигаться по графику вправо/влево с помощью стрелочек.

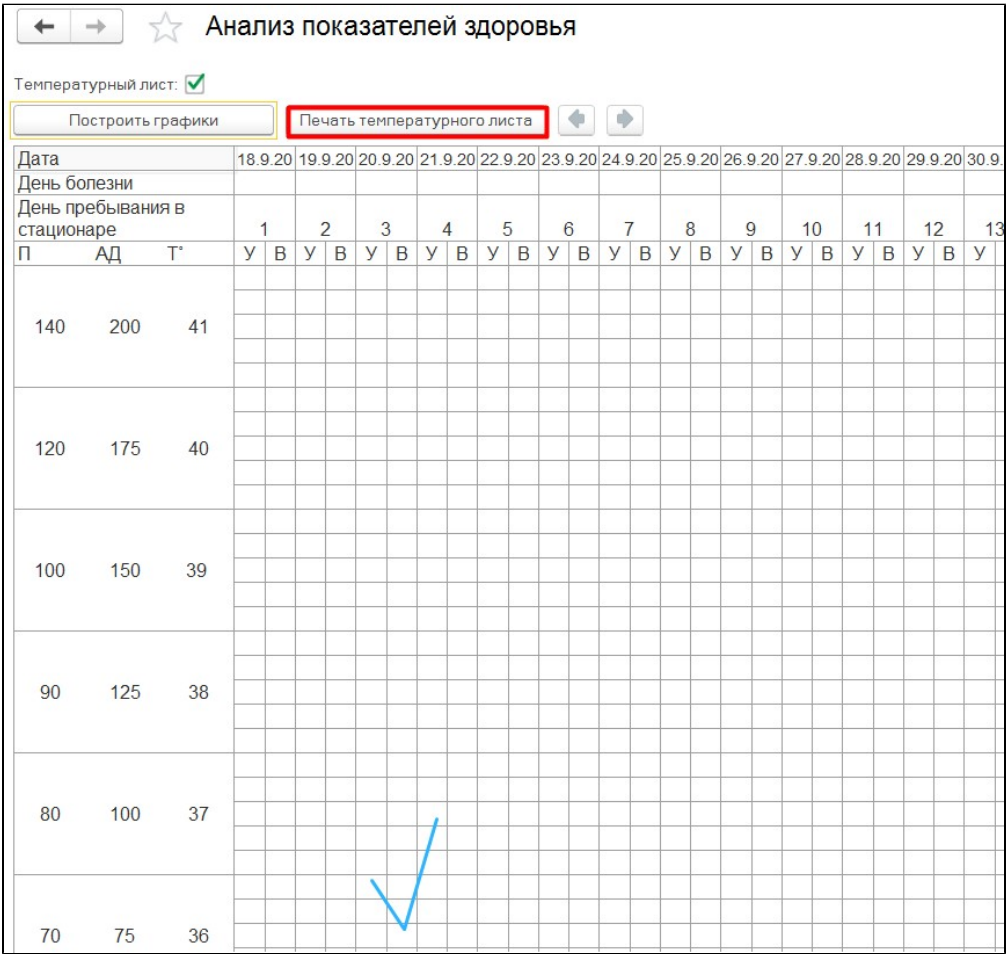

В нижней части графика объясняется какой линией отображается показатель на графике.

